

# polydentia

## katalog produktów

unica Anterior

myQuickmat Forte

myClip 2.0

myQuickmat Classico

myJunior

myQuickmat All-round



innovacyjne rozwiązania do odbudowy  
zębów przednich i bocznych



Unica anterior jest profesjonalnym systemem formówek do odbudowy ubytków zębów przednich klasy III, IV, V, bezpośredniej stratyfikacji licówek kompozytowych i modyfikacji kształtu. Dzięki konturowanemu kształtowi formówki systemu Unica anterior i Unica minideep anterior dopasowują się prawidłowo do różnej budowy wszystkich zębów przednich. Umożliwiają one jednoczesną odbudowę obszarów proksymalnych i przyszyjkowych, nawet w przypadku obecności koferdamu lub nici retrakcyjnych, skracając w ten sposób czas potrzebny do odbudowy. Ponadto po umieszczeniu formówek Unica możliwa jest wizualizacja końcowego kształtu odbudowy jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.

#### **Unica Introkit anterior — REF 6900**

20 szt. formówek Unica anterior  
20 szt. formówek Unica minideep anterior  
40 szt. myWedge XS  
40 szt. myWedge S  
40 szt. myWedge M  
1 szt. myQuickmatrix Forceps

#### **Opakowanie uzupełniające:**

Unica anterior — REF 6912 12 szt. REF 6950 50 szt.  
Unica minideep anterior — REF 6911 12 szt. REF 6951 50 szt.  
myQuickmatrix Forceps — REF 5703  
myWedge Extrasmall (XS) — REF 7101 100 szt.  
myWedge Small (S) — REF 7102 100 szt.  
myWedge Medium (M) — REF 7103 100 szt.

**jedno rozwiązanie  
do odbudowy  
zębów w odcinku  
przednim**

Wszechstronny system  
umożliwiający odbudowę  
wszystkich zębów przednich

Odbudowa obrzeży  
międzyzębowych  
i przyszyjkowych za pomocą  
jednej formówki

Odbudowa prawidłowych  
obrzeży międzyzębowych  
dzięki anatomicznie  
wyprofilowanym formówkom

Łatwe opracowanie obszaru  
przyszyjkowego: wysoka  
przewidywalność odbudowy  
i retrakcji dziąseł

# unica Minideep Anterior

system formówek do odbudowy zębów przednich



polydentia  
swiss manufacture 

## Unica anterior - klasyczna formówka Polydentia do odbudowy zębów przednich

Ultracienka (0,03 mm) stal nierdzewna do ciasnych powierzchni styčných

- Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczanie formówek
- Konturowane w celu uzyskania anatomicznie prawidłowych uzupełnień protetycznych
- Łatwe opracowanie obrzeża przyszyjkowego

Wybierz formówkę Unica anterior w następujących przypadkach:

- siekacze przyśrodkowe szczęki
- siekacze boczne szczęki
- kły



## Unica minideep anterior - jeszcze lepsze dopasowanie do małych zębów przednich

Ultracienka (0,03 mm) stal nierdzewna do ciasnych powierzchni styčných

- Lepsze dopasowanie przyszykowe na siekaczach i bocznych zębach żuchwy
- Skrzydełka pozycjonujące ułatwiające umieszczanie formówek
- Plastikowy materiał zapewniający jeszcze lepsze możliwości dopasowania
- Anatomicznie konturowane w celu uzyskania prawidłowych uzupełnień protetycznych przy naturalnej budowie anatomicznej

Wybierz formówkę Unica minideep anterior w następujących przypadkach:

- siekacze boczne szczęki i żuchwy
- siekacze przyśrodkowe żuchwy
- zęby stożkowate
- zęby trójkątne
- zęby boczne mikrodontyczne
- zęby o małej średnicy przyszykowej



## myQuickmatrix Forceps

Kleszcze myQuickmatrix Forceps zapewniają pewny chwyt formówki podczas jej usuwania po wykonaniu uzupełnienia.

- Do łatwego usuwania formówek
- Końcówki ze specjalnym karbowaniem zapewniającym pewny chwyt
- Odporne końcówki z węgla wolframu

1 szt. myQuickmatrix Forceps — REF 5703



## Jak zakładać formówki Unica

1. Użyj skrzydełek pozycjonujących w celu proksymalnego wprowadzenia formówki Unica. W przypadku ciasnych powierzchni styčných należy zakładać po jednym skrzydełku.



2. Delikatnie pociągnij formówkę za jej skrzydełka pozycjonujące w kierunku podniebienia.



3. Wciśnij łącznik szyjkowy w bruzdę dziąsłową.



4. Wprowadź myWedge, aby zamocować formówkę na miejscu.







Kompletny zestaw matryc sekcyjnych opracowany w celu zapewnienia dokładnej separacji zębów, a w konsekwencji uzyskania doskonałego punktu stykowego przy odbudowie ubytków klasy II. Zestaw ten zawiera: myRing Forte – pierścień sekcyjny, który dzięki wymiennym końcówkom (myTines S, M i L) adaptuje się do sąsiednich zębów o różnych wysokościach koron klinicznych i rozległych preparacjach tkanek.

#### myQuickmat Forte kit — REF 6803

2 szt. myRing Forte  
 2 pary myTines Medium, 1 para myTines Small, 1 para myTines Large  
 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm  
 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm  
 20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,  
 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm  
 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm  
 20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,  
 50 szt. myWedge, Extrasmall (XS)  
 50 szt. myWedge, Small (S)  
 40 szt. myWedge, Medium (M)  
 40 szt. myWedge, Large (L)  
 1 szt. myForceps

#### myRing Forte Refil — REF 6806


2 szt. myRing Forte  
 2 pary myTines M  
 1 para myTines S  
 1 para myTines L

Silna siła separacji w przypadku ciasnych punktów stykowych

Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki

Najwyższej jakości stal nierdzewna

Wymienne, zamienne i autoklawowalne końcówki z tworzywa sztucznego

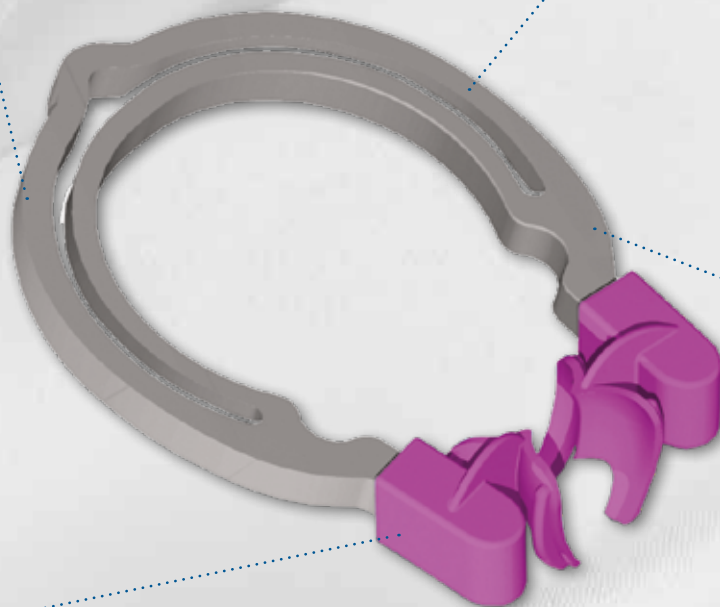

myRing Forte

# myQuickmat Forte starter kit

system matryc sekcyjnych

 polydentia  
swiss manufacture 

Sterylizowalne i wymienne końcówki myTines mogą być użyte w różnych konfiguracjach w celu poprawy dopasowania matrycy. Zestaw zawiera również myWedge – wysokiej jakości, plastikowe kliny anatomiczne oraz ciemnoniebieskie stalowe matryce – LumiContrast, które zwiększają kontrast oraz eliminują efekt „odblasku” podczas pracy w lupach lub pod mikroskopem.

## myQuickmat Forte starter kit — REF 6883


2 szt. pierścieni myRing Forte,  
2 pary myTines Small,  
1 para myTines Medium,  
1 para myTines Large,  
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (przedtrzonowce 0,03 mm / 5 mm),  
10 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX (trzonowce 0,03 mm / 6.4 mm),  
5 szt. Matryc Sekcyjnych QuickmatFLEX Molar Deep (poddziąsłowe 0,03 mm / 6.4 mm+Ext.),  
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm),  
10 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast (trzonowce 0,04 mm / 6.4 mm),  
5 szt. Matryc Sekcyjnych LumiContrast Molar Deep (poddziąsłowe 0,04 mm / 6.4 mm+Ext.),  
40 szt. Klinów myWedge (XS,S,M,L),



## myTines Large - Bardzo dobre dopasowanie do rozległych preparacji ubytków.

myTines Large to nowe końcówki opracowane specjalnie do dopasowania na myClip 2.0 i myRing Forte w celu zwiększenia stabilności pierścieni formówek sekcyjnych na rozległych preparacjach ubytków, nawet w przypadku braku guzka. Asymetria skrzydełek pozwala na idealne dopasowanie do ubytków dystalnych i mezjalnych poprzez odwrócenie pozycji końcówek. Ponadto możliwość łączenia różnych rozmiarów myTines zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilne umocowanie formówki.

6 par myTines Large — REF 6306  
6 par myTines assorted mieszane (Small, Medium, Large) — REF 6310

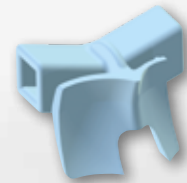

## myTines Medium - Bardzo dobre dopasowanie do zębów o normalnej wysokości korony myTines Small - Bardzo dobre dopasowanie do zębów o małej wysokości korony

myTines Small i myTines Medium są wszechstronnymi końcówkami do myRing Forte i myClip 2.0, opracowanymi w celu precyzyjnego dopasowania formówek sekcyjnych Polydentia do szerokiego wachlarza sytuacji klinicznych i zębów o różnych wysokościach koron. W przypadku odmiennych morfologii zębów możliwość łączenia myTines Small z myTines Medium na tym samym pierścieniu sekcyjnym zapewnia lepsze dopasowanie i stabilne umocowanie formówki do zębów. Anatomiczny kształt myTines Small & Medium umożliwia uzyskanie ciasnych punktów stykowych.

6 par myTines Small — REF 6304  
6 par myTines Medium — REF 6303



## myForceps

myForceps jest dedykowanym instrumentem do bezpiecznego zakładania i usuwania pierścieni sekcyjnych Polydentia: myRing Classico i myRing Forte. Ukształtowane końcówki zapewniają pewny chwyt pierścienia podczas nakładania.

- Łatwe zakładanie wszystkich pierścieni Polydentia
- Pewny chwyt
- Wysoka jakość

1 szt. myForceps — REF 5707





Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych z krótkimi uchwytami, które działają jak kleszcze. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych narzędzi do zakładania, ponieważ pierścień myClip 2.0 można łatwo pozycjonować palcami. myClip 2.0 charakteryzuje się optymalną siłą separacji, która pozwala na odbudowę właściwych punktów stykowych w uzupełnieniach ubytków klasy II. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie końcówek z tworzywa sztucznego (myTines Small, Medium i Large) myClip 2.0 dopasowuje się do zębów o różnych wysokościach koron i rozległych preparacjach ubytków. W przypadku odmiennych morfologii zębów, aby zwiększyć dopasowanie formówki do ścian proksymalnych można łączyć różne rozmiary myTines. Lekarze stosujący myClip 2.0 odnoszą korzyści z długiej żywotności pierścienia wykonanego z najwyższej jakości stali nierdzewnej, wymieniając w razie zużycia wyłącznie końcówki myTines.

#### myClip 2.0 — REF 6305

1 szt. myClip 2.0  
1 para myTines Small  
1 para myTines Medium  
1 para myTines Large  
5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm  
5 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm  
10 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)  
10 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)

#### myClip 2.0 — REF 6805

2 szt. myClip 2.0  
2 pary myTines M  
1 para myTines S  
1 para myTines L

Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia

Optymalna siła separacji

Najwyższej jakości stal nierdzewna

Wymienne, zamienne i autoklawowalne  
końcówki z tworzywa sztucznego

myClip 2.0



### QuickmatFLEX matryce sekcyjne


QuickmatFLEX to ultracienkie (0,03 mm) tytanowe matryce sekcyjne z pamięcią kształtu. Łatwe w użyciu, oferują odpowiednią równowagę pomiędzy elastycznością i sztywnością, aby zoptymalizować pozycjonowanie i adaptację w ciasnych przestrzeniach międzyzębowych. Matryce QuickmatFlex, dzięki zmniejszonej grubości i ulepszonemu stopowi metalu są odporne na odkształcenia - ich wysoka sprężystość umożliwia powrót do pierwotnego kształtu. Matryce sekcyjne QuickmatFLEX zostały ocenione jako doskonałe przez 77% klinicystów (CR Clinicians Report).

Opakowania:

100 szt. Premolar 0.03mm/5mm — REF 6785

100 szt. Molar 0.03mm/6.4mm — REF 6786

50 szt. Molar Deep 0.03mm/6.4mm + Ext. — REF 6787

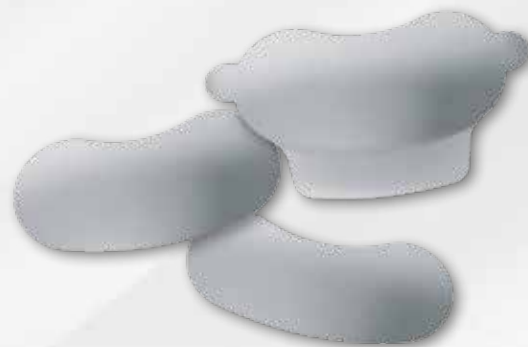

### LumiContrast matryce sekcyjne

Innowacyjne matryce sekcyjne. Dzięki zastosowaniu matowej niebieskiej powierzchni matryce charakteryzują się niskim współczynnikiem odbicia światła, zapobiegając refleksom świetlnym. Duży kontrast między ciemną formówką a jasnymi tkankami zęba, pozwala na precyzyjną identyfikację obszaru roboczego. Matryce LumiContrast są wykonane ze stali najwyższej jakości, są odporne na zarysowania, doskonale odwzorowują krzywizny zęba i nie ulegają odkształceniom pod wpływem klinów międzyzębowych. LumiContrast doskonale sprawdzają się przy pracy z nowoczesnymi technologiami o intensywnym świetle, takimi jak lupy i mikroskopy dentystyczne.

- Duży kontrast
- Niski poziom odbicia
- Idealne podczas używania lupy lub mikroskopu

Zestawy:

70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708

70 szt. (0.025mm/5mm) — REF 6735

70 szt. (0.025mm/6.4mm) — REF 6736

50 szt. Molar Deep (0.025mm/6.4mm) — REF 6756

70 szt. (0.04mm/5mm) — REF 6705

70 szt. (0.04mm/6.4mm) — REF 6706

50 szt. Molar Deep (0.04mm/6.4mm) — REF 6746



### Quickmat matryce sekcyjne

Profilowane matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej dostępne w trzech wysokościach anatomicznych i dwóch grubościach.

Zestawy:

100 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 5708

100 szt. (0.025mm/5mm) — REF 5735

100 szt. (0.025mm/6.4mm) — REF 5736

50 szt. Deep Molar (0.025mm/6.4mm) — REF 5756

100 szt. (0.04mm/5mm) — REF 5705

100 szt. (0.04mm/6.4mm) — REF 5706

50 szt. Deep Molar (0.04mm/6.4mm) — REF 5746



### myWedge kliny międzyzębowe

myWedge jest klinem międzyzębowym wykonanym z zaawansowanego technologicznie tworzywa sztucznego. Jego wydrążony kształt litery V umożliwia mu kompresję i dopasowanie się do anatomii przestrzeni międzyzębowych. Zapobiega uszkodzeniu brodawki, jednocześnie prowadząc i formując pasek formówki zgodnie z anatomią obszaru przyszyjkowego zęba. Unikalna geometria okrągłej główki myWedge została zaprojektowana w celu łatwego posługiwania się klinem, jego umieszczania i usuwania za pomocą standardowej pincety lub kleszczy.

- Wydrążony kształt litery V zapewniający lepsze dopasowanie przyszyjkowe
- Chwytna główka zapobiegająca przesuwaniu się
- Jaskrawe kolory ułatwiające identyfikację

Zestawy:

100 szt. (XS) — REF 7101

100 szt. (S) — REF 7102

100 szt. (M) — REF 7103

100 szt. (L) — REF 7104

100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 7100

400 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 7400



### Wood Wedges kliny międzyzębowe

Drewniane kliny międzyzębowe wykonane z drewna klonowego pochodzącego ze szwajcarskich lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

100 szt. 11mm (XS) — REF 5011S

200 szt. 11mm (XS) — REF 5011

100 szt. 12mm (S) — REF 5012S

100 szt. 13mm (M) — REF 5013S

100 szt. 15mm (L) — REF 5015S

100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5001

100 szt. assorted (XS,S,M,L) — REF 5040

200 szt. 11.5 mm — REF 5018

100 szt. 17mm (XL) — REF 5017S







Kompletny system matryc sekcyjnych opracowany z myślą o delikatnej separacji zębów w celu odbudowy idealnych punktów stykowych przy wypełnianiu ubytków klasy II. Zestaw zawiera myRing Classico - klasyczny pierścień wykonany ze stopu niklo-tytanowego. Wzmocniony pierścień w połączeniu z dołączonymi klinami Wood Wedges, zapewnia optymalną siłę separacji. Delta Tubes - anatomiczne, silikonowe końcówki, zapewniają optymalną retencję matrycy i dopasowanie do anatomii zęba. Zalecane do odbudowy rozległych ubytków. Asortyment zestawu uzupełniają matryce sekcyjne LumiContrast. Te ciemnoniebieskie matryce znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt odbłasku, szczególnie podczas używania lupy lub mikroskopu.

### myQuickmat Classico kit — REF 6801

2 szt. myRing Classico  
6 par Delta Tubes  
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm  
50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm  
20 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,  
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm  
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, trzonowce 0,04 mm / 6,4 mm  
20 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, rozszerzone, 0,04 mm / 6,4 mm+ przedł.,  
50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)  
50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)  
40 szt. Wood Wedges, 13 mm (M)  
40 szt. Wood Wedges, 15 mm (L)

### myRing Classico — REF 6804

2 szt. myRing Classico 2.0  
2 pary Delta Tubes

Anatomicznie ukształtowane, autoklawowalne końcówki silikonowe, zapewniają optymalną retencję formówki i dopasowanie do anatomii zęba



Pierścień niklo-tytanowy ze wzmocnieniem

myRing Classico


### Delta Tubes



15 par — REF 5712

### Diamond<sup>24</sup>

Diamond<sup>24</sup> są anatomicznie ukształtowanymi silikonowymi końcówkami przeznaczonymi do stosowania z pierścieniem sekcyjnymi myRing Classico. Diamond<sup>24</sup> mogą być zorientowane w 24 różnych kombinacjach kształtu i długości, zapewniając optymalną retencję formówki i dopasowanie do zęba, nawet w przypadku trudnych sytuacji klinicznych.

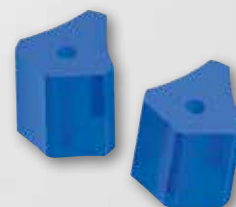

15 par — REF 6312



# myJunior kit

pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii dziecięcej



polydentia  
swiss manufacture 

myJunior kit to pierwszy system formówek sekcyjnych do stomatologii dziecięcej, opracowany specjalnie z myślą o mniejszych zębach mlecznych i młodych zębach stałych. Umożliwia stomatologom uzyskanie przewidywalnych uzupełnień i odpowiednich powierzchni styčných. Zestaw oferuje przyjazne dzieciom rozwiązania, które pomagają zaoszczędzić czas spędzany na fotelu i zmniejszyć niepokój dzieci.

## Zestaw myJunior — REF 6330

- 1 szt. myClip Junior
- 1 szt. myRing Junior
- 5 par Cylindryczne końcówki silikonowe
- 5 par myTines Junior
- 40 szt. Formówki sekcyjne LumiContrast, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 40 szt. Formówki sekcyjne Junior LumiContrast, 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Quickmat, przedtrzonowce 0,04 mm / 5 mm
- 50 szt. Formówki sekcyjne Junior Quickmat, 0,04 mm / 3,75 mm
- 50 szt. Pinky Wood Wedges, 11 mm (XS)
- 50 szt. Wood Wedges, 12 mm (S)
- 50 szt. myWedges XS
- 50 szt. myWedges S

myjunior  
kit



## myClipjunior

**Uniwersalny pediatryczny pierścień do formówek sekcyjnych ze zintegrowanymi kleszczami**

- Uniwersalny pierścień do formówek sekcyjnych. Bez konieczności stosowania skomplikowanych kleszczy
- Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
- Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni styčných
- Szybkie, łatwe, jednoręczne umieszczanie pierścienia
- Autoklawowalne i wymienne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6335



## myRingjunior

**Pediatryczny pierścień formówki sekcyjnej pasujący do wielu różnych sytuacji klinicznych**

- Niewielki rozmiar pasujący do zębów mlecznych w jamie ustnej dzieci
- Pierścień wykonany z odpornego na odkształcenia stopu niklowo-tytanowego
- Optymalna siła separacji w celu uzyskania właściwych powierzchni styčných
- Bardzo dobre dopasowanie i retencja formówki
- Autoklawowalne i wymienne końcówki myTines Junior z tworzywa sztucznego

2 szt. — REF 6336



## myTines Junior

Autoklawowalne i wymienne końcówki z tworzywa sztucznego, które pasują do klina i zapewniają doskonałe dopasowanie formówki.


15 par — REF 6333



## Kończówki silikonowe

Miękkie końcówki zapewniające pewniejszy chwyt i dodatkowe dopasowanie.

15 par — REF 5711

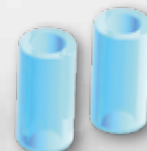

## Junior Quickmat matryce sekcyjne

Profilowane matryce sekcyjne ze stali nierdzewnej

100 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 5708



## Junior LumiContrast matryce sekcyjne

Formówki w kolorze ciemnoniebieskim, które znacznie zwiększają kontrast i redukują efekt odbłasku.

70 szt. Junior (0.04mm/3.75mm) — REF 6708





myQuickmat All-round to system formówek całkowitych, przeznaczony do wykonywania anatomicznych uzupełnień zębów bocznych z brakującymi strukturami. Łatwe w użyciu formówki Quickmat All-round umożliwiają wykonanie uzupełnień o naturalnie konturowanej anatomii i ciasnych powierzchniach styknych. Dzięki API (Autoclavable Placement Instrument) zakładanie formówek Quickmat All-round jest stabilne i proste. API zapewnia wsparcie i zapobiega przechylaniu się szpuli napinającej podczas napinania formówki. Dzięki systemowi formówek całkowitych myQuickmat All-round można wygodnie leczyć trudne przypadki w odcinku bocznym, pracując na wolnym od przeszkód, dostępnym polu zabiegowym.

### Zestaw wprowadzający myQuickmat All-round — REF 6850

2 szt. API (autoklawowalny instrument do zakładania Quickmat All-round)  
15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, przedtrzonowce — 0,03 mm / 5,5 mm  
15 szt. Formówki całkowite boczne Quickmat All-round, trzonowce — 0,03 mm / 6,3 mm  
45 szt. Kliny międzyzębowe The Wedge — mieszane

### Polecane szczególnie do odbudowy w następujących przypadkach:

- Brak sąsiedniego zęba
- Zęby z brakującymi guzkami
- Izolacja zęba do odbudowy zrębu
- Ubytki typu MOD



### Quickmat All-round

Łatwe napinanie ręką

Anatomicznie konturowane w celu uzyskania lepszych uzupełnień protetycznych i prawidłowych punktów styknych


Ultracienkie (0,03 mm) do ciasnych punktów styknych

### API

Autoklawowalny instrument do zakładania formówek

### The Wedge

Kliny międzyzębowe, które łączą w sobie elastyczność i sztywność, zapewniając optymalne dopasowanie formówki.

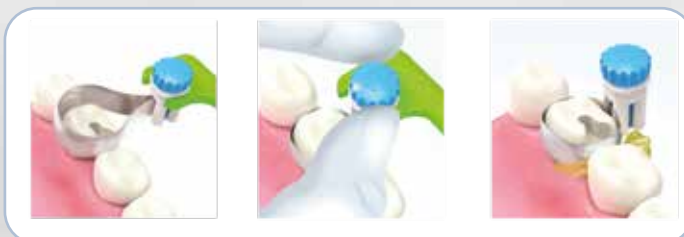

35 szt. formówek — przedtrzonowce 0,03 mm / 5,5 mm — REF 6855  
35 szt. formówek — trzonowce 0,03 mm / 6,3 mm — REF 6856  
2 szt. API — REF 6851

# Fiber Splint

taśmy z włókna szklanego



polydentia

swiss manufacture

F-Splint-Aid & Slim to wstępnie impregnowane taśmy z włókna szklanego. Taśmy F-Splint-Aid (4 mm) i F-Splint-Aid Slim (2 mm) charakteryzuje taka sama wytrzymałość. Wersja Slim została zaprojektowana z myślą o zabiegach na mniejszych powierzchniach. Praktyczne czarne butelki chronią włókno szklane przed światłem i umożliwiają precyzyjne dozowanie długości taśmy minimalizując straty materiału. Każda butelka zawiera taśmę z włókna szklanego, która wystarcza na 4-7 aplikacji, w zależności od zabiegu, który ma być wykonany. Opakowanie zawiera Clip&Splint - autoklawowalne klipsy międzyzębowe z tworzywa sztucznego. Produkt został kilkakrotnie nagrodzony przez renomowane amerykańskie czasopismo „The Dental Advisor”.

## F-Splint-Aid & Slim Introkit — REF 5980

1 szt. F-Splint-Aid (szer. 4 mm, dł. 120 mm) zaimpregnowane Fiber-Bond + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint  
1 szt. F-Splint-Aid Slim (szer. 2 mm, dł. 120 mm) zaimpregnowane Fiber-Bond + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

## F-Splint-Aid — REF 5972

1 szt. szer. 4 mm, dł. 120 mm + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint

## F-Splint-Aid Slim — REF 5977

1 szt. szer. 2 mm, dł. 120 mm + 5 klipsów aplikacyjnych Clip&Splint



## Fiber-Splint

Taśma z włókna szklanego, jednowarstwowa, nienasączona. Szerokość 4mm, długość 2m.

## Fiber-Splint — REF 5970

1 szt. (długość 2 metry)  
5 szt. klipsów aplikacyjnych Clip&Splint




## Clip & Splint — Klipsy aplikacyjne

Clip&Splint to klipsy aplikacyjne, które zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia optymalnego pozycjonowania i perfekcyjnego utrzymania taśmy z włókna szklanego w przestrzeniach międzyzębowych podczas utwardzania światłem. Clip&Splint można sterylizować w autoklawie, nie zawierają lateksu.

## Clip & Splint — REF 5975CS

30 szt. klipsy aplikacyjne,

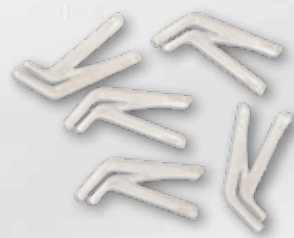

## Zastosowania kliniczne taśm z włókna szklanego Polydentia



### Szynowanie periodontologiczne

„System F-Splint-Aid firmy Polydentia jest szybkim, łatwym i ekonomicznym rozwiązaniem do szynowania periodontologicznego ruchomych zębów. System daje możliwość zastosowania bardzo cienkiej szyny, która jest dobrze akceptowana przez pacjentów, ponieważ nie zaburza funkcjonalności ani nie wpływa na estetykę”.

dr Lukas Sigrist, Szwajcaria

### Tymczasowe rozwiązanie na czas oczekiwania na implant










„Dzięki F-Splint-Aid możliwe stało się zaoferowanie tymczasowego rozwiązania, tylko podczas jednej wizyty, z dobrą relacją między wynikiem a ceną, w oczekiwaniu na implant. To tymczasowe rozwiązanie zapewnia również optymalny rezultat estetyczny, co jest punktem krytycznym, ponieważ w grę wchodzi zęby przednie”.

dr Giacomo Derchi, Włochy



Ulotka przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika Profesjonalnego.

specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne

 MARKU DENTAL sp. z o.o.  42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31  
 marku.pl  markudental  biuro@marku.pl  e-marku.pl  
 34 367 00 00  34 374 05 25 do 27  602 321 299, 784 439 470

